

## 粘稠性液体专用密度测试仪

**适用于：**分散漆、陶瓷浆、油墨、液态树脂、研磨液体、沥青、液态胶黏剂、中、高黏性流动性液体研究实验室。

**原理：**采用阿基米得的浸渍 Gamma 球体积置换法，配合专用比重计特殊设计，准确的读取量测数值。

### 产品介绍：

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

### 产品特点：


- 使用真空机可预先抽除高黏度液体中可能夹带的空气。
- 可任意调整 Gamma 液面浸没深度。
- 可改进使用盖伊芦萨克和哈伯德比重瓶的瓶口沾粘的问题。
- Gamma 球可轻易取下更换，操作方便。
- 任何重量的 Gamma 球砝码皆可为其标准值，不受体积的限制。
- 能补偿因空气浮力所造成的误差。
- 可以实现微调，测量更准确。
- 只需要一键及可以得出结果

以下是粘稠液体几款热销产品如有其他需求可以与我司联系

### 规格：

型号：	DX-120BM	DX-300BM
样品重量范围：	0.001g~120g	0.005g~300g
样品密度精度：	0.0001 g/cm <sup>3</sup>	0.001 g/cm <sup>3</sup>
取样量说明：	标配 50ml 量杯 样品能没过 Gamma 即可 可以采用一次性杯子测量	
测试种类：	流动性、中、高黏度液体、膏状无流动性除外 (保证 Gamma 球下压后样品可以自动没过 Gamma 球)	
升级装置：	精密微调装置测量更准确	
设定功能：	温度补偿设定、溶液补偿设定	
测试结果：	直接读取液体的比重	
测试时间：	10 秒	
标准接口：	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备	
防风罩：	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见	
电压：	AC100-240V-50/60HZ DC 7.5V 600mA	
仪器尺寸：	270*310*270mm	
包装尺寸：	450*240*460mm	
重量：(毛重)	7.5kg	
标准附件：	①主机 ②下压组件 ③Gamma 球 ④量杯 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 电源	
选配附件：	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能)	

产品图片；

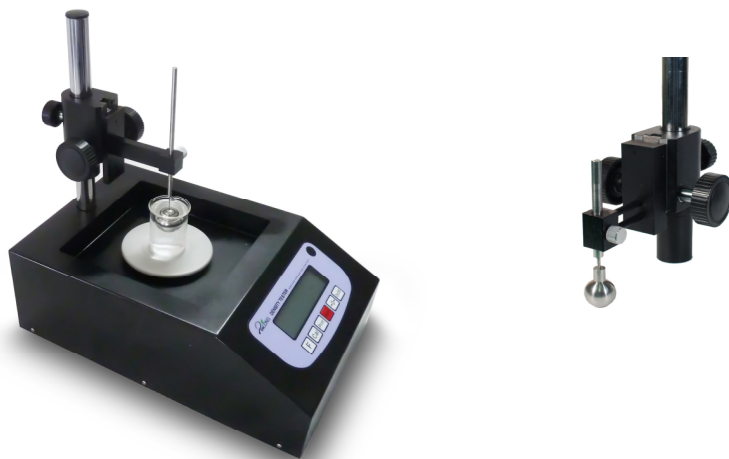

**群隆仪器售后服务：**

1. 所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
2. 所有产品均免费保修一年，终身维护。
3. 所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
4. 关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
5. 如果更多需要可以根据您的要求定制产品